

FICHE AUDIT Mindray « BENEHEART D1 »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :


Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / /

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /

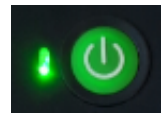

⇒ **Sur la face avant :**

L'indicateur du défibrillateur clignote en vert : Oui / Non (à côté du bouton marche/arrêt)

⇒ **Version du logiciel :** . . - . . - . . (Utiliser la page 2 pour vous aider)

Cocher le type de DAE de marque MINDRAY BeneHeart D1 :

Référence : ☐ Semi-automatique (présence du bouton choc orange)

☐ Automatique (pas de bouton choc orange)



⇒ **Retourner le défibrillateur**

Numéro de série du défibrillateur : (à côté du symbole « SN »). Ex : **FQ-66005848**

Date de fabrication (à côté du symbole « USINE ») :-.....-.....

⇒ **Informations sur les électrodes**

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Electrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ MR60

☐ MR62

Si autre référence, précisez :

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :-.....-..... Exemple : 2023-02-28

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 200228-4014

Electrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ MR63

Si autre référence, précisez :

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :-.....-..... Exemple : 2027-06-25

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 240625-4327



⇒ **Retirer la batterie**



Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Cocher la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée : ☐ LM34S001A

Si autre référence, précisez :

Numéro de série (à côté du symbole « SN ») : (Exemple : DSM01LM1-00764)

Date Limite d'Utilisation (à côté du symbole « SABLIER ») :-.....

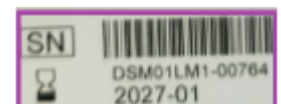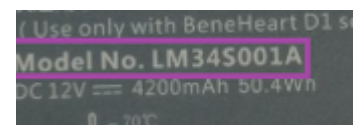

⇒ **Remettre la batterie** => L'indicateur du défibrillateur clignote en vert : Oui / Non

⇒ **Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cocher l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ **Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :


Date :

Nom :


Signature Client / Référent :

Afin d'obtenir la version, suivez les étapes ci-dessous

- 1) Appuyez sur le bouton « Marche / Arrêt »
Puis de nouveau pour obtenir l'écran ci-dessous.

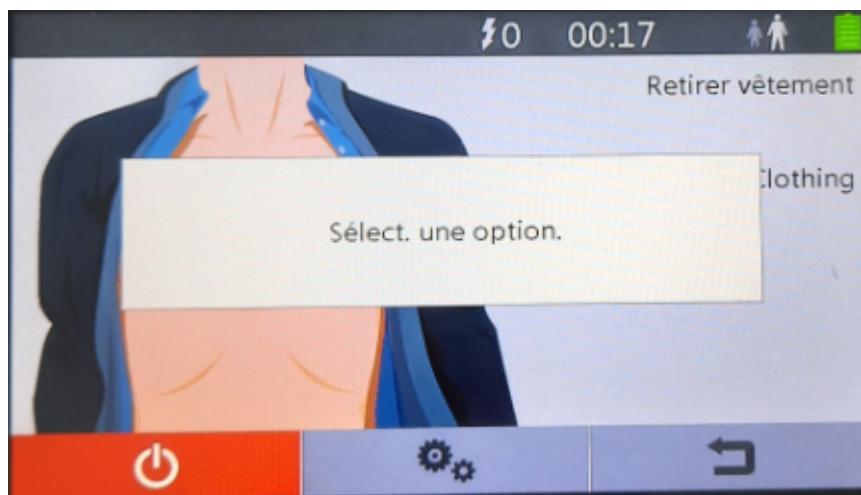


- 2) Appuyez sur le bouton sous ce symbole

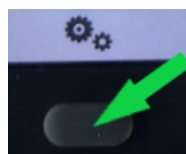


- 3) Appuyez sur le bouton sous ce symbole



- 4) Appuyez sur le bouton sous « Infos système »

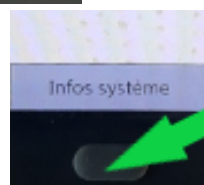

- 5) Relevez la version affichée à l'écran. Exemple ci-dessous : 01.02.00
Notez dans la version : 01.02.00

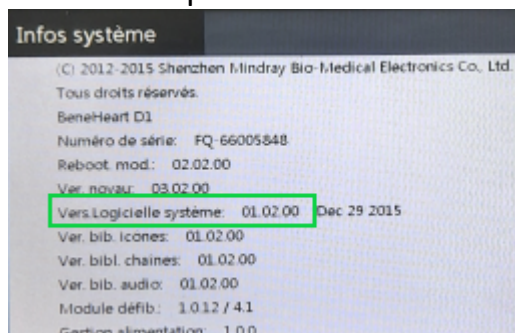

- 6) Appuyer sur le bouton sous ce symbole



puis éteignez le DAE