

## FICHE AUDIT PHILIPS « HS1 »

**Société** (Collectivité, administration, entreprise...) :

**Adresse :**

**Adresse du défibrillateur si différente :**

**Emplacement du DAE** (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

**Nom du référent :**


**Adresse email :**

**Téléphone :**

**Portable :**

**Date de la mise en service:** ..... / ..... / .....

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : ..... / ..... / .....

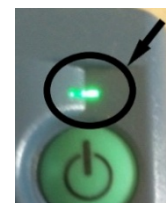

⇒ **Sur la face avant :**

**L'indicateur du défibrillateur clignote en vert :** Oui / Non (Au-dessus du bouton marche / arrêt)

⇒ **Informations sur les électrodes**


(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

**Électrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :** ☐ M5071A

Si autre référence, précisez : .....

**Date de péremption** (à côté du symbole « SABLIER ») : .....-.....-..... Exemple : 2027-25-22

**Lot** (à côté du symbole « LOT ») : ..... Exemple : C11224-03

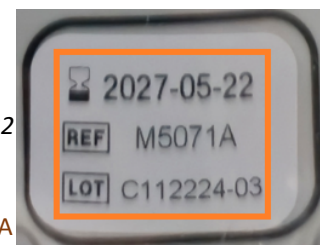

**Électrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :** ☐ M5072A

Si autre référence, précisez : .....

**Date de péremption** (à côté du symbole « SABLIER ») : .....-.....-..... Exemple : 2028-08-02

**Lot** (à côté du symbole « LOT ») : ..... Exemple : C12445-02

⇒ **Retourner le défibrillateur**

**Cocher le type de DAE de marque PHILIPS HS1 :**

**Référence :** ☐ M5066A

Si autre référence, précisez : .....

**Numéro de série du défibrillateur :** ..... (A l'arrière du défibrillateur. Ex : **A17F-02712**)



⇒ **Retirer la batterie**

**Date du dernier changement de la batterie lithium :** ...../...../.....

**Cochez la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée :** ☐ M5070A

Si autre référence, précisez : .....

**Date Limite d'Installation (Ce n'est pas une date de péremption) :** ..... - ..... - .....

(à côté du logo « INSERTION ») (Exemple 2030-11-30)


**Date de fabrication de la batterie** (à côté du symbole « USINE ») : ..... - ..... - .....

**Présence des lettres MX** (dans le logo « USINE ») : Oui / Non

**N° de série de la batterie : SN** (à côté du logo « SN ») : .....

**Lot** (à côté du symbole « LOT ») : ..... (Exemple : 33924)

Étiquette présente sur les nouvelles batteries

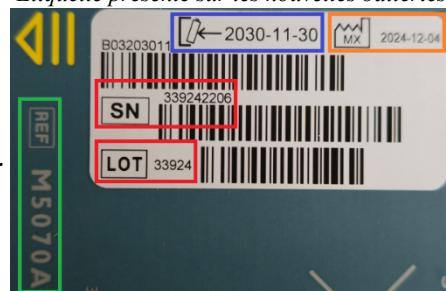

⇒ **Remettre la batterie**

(quelques secondes après avoir retiré la batterie, remettez-la et suivez le protocole d'auto test qui dure environ 40 sec).

**L'auto test est concluant :** Oui / Non ⇒ **Les messages vocaux sont clairs et compréhensibles :** Oui / Non

⇒ **Le défibrillateur est stocké en permanence entre 10°C et 43°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

**Cochez l'installation :** Extérieur ☐ Intérieur ☐ **Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

**DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j :** Oui / Non **Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :**

**Date :**

**Nom :**

**Signature Client / Référent :**