

FICHE AUDIT SCHILLER « FRED EASY / FRED EASY LIFE »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :

Date de la mise en service : / / (Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /



Easy



Easy Life



⇒ Sur la face avant :

L'indicateur du défibrillateur clignote en vert : Oui / Non

Présence de choc, fissure, bruit suspect : Oui / Non

⇒ Numéro de la version et hardware :

(Pour obtenir la version (A), il faut allumer le défibrillateur en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Noter la version commençant par « V » inscrite sur l'écran)

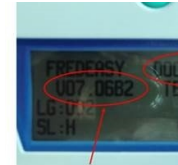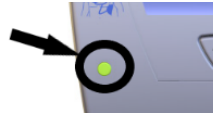

⇒ Retourner le défibrillateur

Numéro de série du défibrillateur : (A l'arrière du défibrillateur. Ex : 05899030007)

⇒ Cocher le type de DAE de marque SCHILLER FRED EASY :

☐ DSA ☐ DEA (symbole Auto de présent sur la face avant)

☐ SCHILLER FRED EASY (le numéro de série commence par 05899...)

☐ SCHILLER FRED EASY LIFE (le numéro de série commence par 05895...)



⇒ Informations sur les électrodes

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Electrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 0-21-0020 Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 250130-4015

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2028-07-30

Electrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 0-21-0037 Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 250114-05

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2027-06-25



⇒ Retirer la batterie

Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Cochez la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée : ☐ 4-07-0001

Si autre référence, précisez :


Lot (à côté du symbole « LOT ») : (Exemple : HYB 15-0042)

Date de Limite d'Utilisation (à côté du symbole « USINE ») :-.....

⇒ Remettre la batterie => L'indicateur du défibrillateur clignote en vert : Oui / Non

⇒ Date du dernier changement de la pile de sauvegarde :/...../.....

(Pile de sauvegarde soudée sur la carte électronique dans l'appareil. L'étiquette d'origine en haut à gauche, à l'arrière du DAE est présente. Si elle est non percée et identique à la photo, cochez « Etiquette d'origine »)

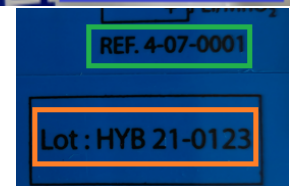

⇒ Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non Présence d'un accueil : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :



Date :

Nom :

Signature Client / Référent :