

FICHE AUDIT ZOLL « AED PLUS »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / /

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /

⇒ **Sur la face avant :**

L'indicateur « coche verte » du défibrillateur est présente : **Oui / Non**

⇒ **Retirer le capot à l'avant du DAE**



Cocher le type de DAE de marque ZOLL AED PLUS :

⇒ Pour valider le choix ci-dessus : Sur la face avant du DAE, après le retrait du capot, vous serez face à un écran avec des pictogrammes. Vous avez soit l'icône du cœur avec la main, soit le cœur seul

☐ **ZOLL AED PLUS DSA**



☐ **ZOLL AED PLUS DEA**



⇒ **Informations sur les électrodes**

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Électrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 8900-0800-01 ☐ 8900-0815-01 ☐ 8900-0801-01 ☐ 8900-0402

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») :Exemple : 0922A

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :Exemple : 2027-05-26


Électrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 8900-0810-01

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») :Exemple : 0922A

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :Exemple : 2027-05-26

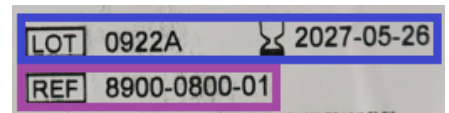

⇒ **Retourner le défibrillateur**

Numéro de série du défibrillateur :(A l'arrière du défibrillateur. Ex : **X14B653988**)

⇒ **Retirer le capot des piles** (Voir aide au retrait du capot des piles en page 2)

Date du dernier changement des piles lithium :/...../.....

Cochez la marque de vos piles : **Duracell Lithium** ☐ **PowerOne** ☐ **Autre marque** ☐

Si Duracell / Date de fabrication des piles :/.....

(Inscription noire sur un fond noir. Ex : **2016/07**)

Si Duracell / Date limite d'utilisation :/.....

(Inscription blanche sur un fond noir. Ex : **MAR 2021**)

⇒ **Récupérer le numéro de la version :**

(Pour obtenir la version, il faut rester appuyé sur le bouton marche/arrêt en continu. Dès que l'écran s'allume, relâcher l'appui. La version de MAJ commençant par « P » va s'afficher. Ex : P:05.32)

⇒ **Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C :** **Oui / Non**

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ **Présence d'un PC Sécurité :** **Oui / Non** **Présence d'un accueil :** **Oui / Non**

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : **Oui / Non** Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :



Date :

Nom :

Signature Client / Référent :

Aide au retrait du capot des piles

Vérifier que l'appareil est hors tension. Ouvrir le compartiment des piles en retirant le couvercle de ce compartiment, situé à l'arrière de l'appareil.

Pour cela, insérer un petit outil (par exemple, un tournevis plat) dans les deux fentes situées à l'arrière de l'appareil pour appuyer sur les loquets, puis introduire l'outil dans la rainure pour soulever le couvercle (voir Figure 7).



Figure 7 : Retrait de la porte du compartiment des piles

